




Une capacité supérieure et une lecture exceptionnelle: les laboratoires exigeants peuvent avoir le meilleur des deux monde avec la série ABL d'Adam Equipment. Le pesage d'échantillons répétitif devient beaucoup moins fastidieux avec l'opération simple de l'ABL, et les résultats sont clairement visibles sur l'écran rétroéclairé. Les résultats sont facilement enregistrés grâce à l'interface RS-232, tandis que les impressions conformes aux normes GLP contiennent les données et le temps. Capable de mesures sous la balance, l'ABL peut effectuer des déterminations de densité et de mesurer la gravité spécifique. L'ABL possède le calibrage interne standard, et la balance se calibre automatiquement quand c'est nécessaire.

**Lecture de précision, capacité avancée
- une performance sans compromis**

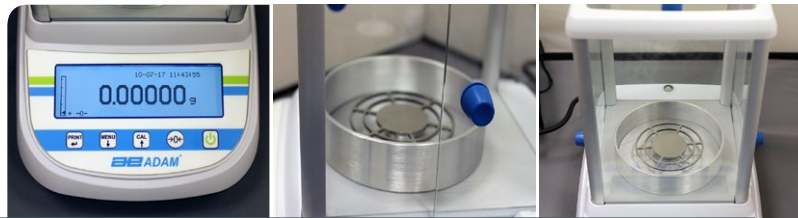

Caractéristiques

- Écran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans n'importe quelles conditions d'éclairage
- Touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées
- L'indicateur de niveau et les pieds réglables assurent la stabilité de la balance pour optimiser les résultats de pesée
- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- Le design léger facilite le transport et la portabilité
- Clavier étanche protège contre la saleté et les déversements accidentels
- Les impressions comprennent la date et l'heure pour les données de suivi au sein des Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL)
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons prédéfinies
- Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids
- Mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro
- Filtrage numérique sélectionnable pour les effets de contrôle des vibrations et les perturbations
- Adaptateur secteur inclus

Application

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Contrôle du poids
- Pesage d'animaux / dynamique
- Détermination de densité
- Fige les résultats sur l'écran
- Accumulation de poids
- Formulation

A Propos d'Adam Equipment

Depuis plus de 40 ans, les professionnels dans le monde entier comptent sur Adam Equipment pour fournir une vaste sélection d'équipements de pesage fiables et abordables. Adam offre la balance idéale associant vitesse, performance et valeur.

Modèle	ABL 125	ABL 225
Capacité	42g / 120g	82g / 220g
Précision	0.01mg / 0.1mg	0.01mg / 0.1mg
Reproductibilité (S.D)	0.025mg / 0.15mg	0.05mg / 0.15mg
Linéarité (+/-)	0.05mg / 0.2mg	0.1mg / 0.2mg
Taille du plateau	80mm ø	
Unités de pesage	mg, g	
Temps de stabilisation (sec)	6	
Interface	RS-232	
Calibrage	Calibrage Interne Automatique	
Affichage	Ecran Graphique	
Alimentation	Adaptateur 24V 50/60Hz 500mA	
Température d'utilisation	15° à 30°C	
Boîtier	ABS	
Chambre de protection	Chambre 171x162x225mm	
Dim. totale	215x345x345mm (lpxh)	
Poids net	7kg	

Accessoires

Numéro d'article Description

104008036	Table Anti-Vibration
3126011263	Rouleau de papier thermique pour ATP
3126011281	Papier thermique pour imprimante ATP (lot de 10)
1120011156	Imprimante Thermique ATP
3074010266	Câble RS-232 vers PC
3074010507	RS-232 vers Câble interface USB
	...(doit être commandé avec le câble RS-232)
700660290	Certificat de Calibrage

Accessoires Principaux**Imprimante Thermique ATP**

La facilité d'utilisation combinée avec une mise en route rapide correspond à une imprimante thermique vraiment polyvalente. Un bouton-poussoir unique d'alimentation et trois indicateurs LED faciles à lire permettent un fonctionnement simplifié.

Fourni par