




Die Highland-Waagen von Adam Equipment haben alles, was man für Laborarbeit, Außenarbeiten, und verschiedene Industrieanwendungen braucht. Sie besitzt viele Wägeeinheiten, eine RS-232- und eine USB-Schnittstelle, kann über Netz und Akku betrieben werden, hat eine Kapazitätsanzeige, höhenverstellbare Füße und Libelle, Verriegelung, und mehr. Bestimmung von Dichte und spezifischem Gewicht sind leicht mit der Unterflurwägevorrichtung, und der abnehmbare Windschutz blockiert störenden Zug im Freien oder in zugigen Umgebungen. Der ShockProtect-Überlastschutz schützt und sichert die Leistung der Highland, und das interne Kalibriergewicht HandiCal® sorgt für fortwährend zuverlässiges Wiegen. Mit den eingebauten Anwendungen für Stückzählung, Prozentwägung und Summierung / Aufspeicherung ist die Highland voller nützlicher Merkmale.

## Kostengünstige Präzisionswaage mit sehr umfangreicher Ausstattung

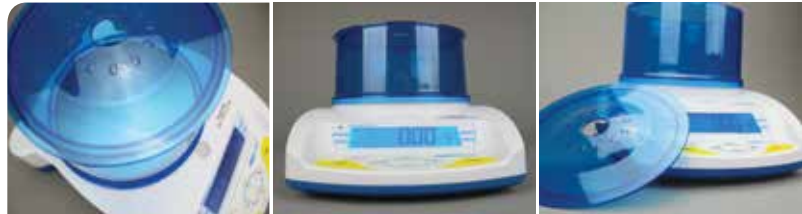

### Merkmale und Funktionen

- Helles hinterleuchtetes LCD, auch in schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar
- Programmierbare Displaybeleuchtung mit "immer an", "immer aus", und "nur beim Wiegen" als Optionen
- Display mit Kapazitätsanzeige
- Stapelbar, können somit platzsparend verstaut werden
- Farblich hervorgehobene Tasten erlauben schnelles Arbeiten
- Duale Taratasten für links- und rechtshändige Bedienung
- Libelle und höhenverstellbaren Füße zum Nivellieren
- Integrierter Sicherungsschlitz für Schloss und Kabel (Typ Kensington, opt.)
- Große, leicht zu reinigende Wägeplatte aus Edelstahl
- Robustes ABS-Gehäuse für Einsatz in anspruchsvollem industriellem Arbeitsumfeld
- Drei-Punkte ShockProtect® schützt vor Beschädigung des Wägemechanismus auch bei starker Überlastung
- Haken für Unterflurwägung inklusive
- Interne Kalibrierung – kein externes Gewicht nötig
- USB I/O und RS-232 Schnittstellen für schnellen Datenaustausch mit Computern und Druckern
- Akustischer Alarm warnt vor Überlastung
- Modellausführungen mit externer und interner Kalibrierung, sowie eichfähige Modelle verfügbar
- Wählbare digitale Filter liefern stabile Ergebnisse bei beweglichen Objekten
- Stückzählung mit voreingestellten Probengrößen
- Summenspeicher summiert Ergebnisse
- Durch die Nullnachführung geht die Anzeige immer auf Null zurück
- AC-Adapter inklusive
- Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar
- Die Funktion Automatisches Abschalten ist einstellbar und energiefreundlich

### Anwendungen

- Wägung
- Stückzählung
- Prozentwägung
- Summenspeicher

### Über uns:

Seit über 40 Jahren verlassen sich Fachleute weltweit auf Adam Equipments breite Auswahl an zuverlässiger und preisgünstiger Wiegeausrüstung. Adam liefert das richtige Gleichgewicht aus Geschwindigkeit, Leistung, und Wert.

Modell	HCB 123	HCB 153	HCB 302	HCB 602	HCB 602H	HCB 1002	HCB 1502	HCB 2202	HCB 3001	HCB 6001
<b>Kapazität</b>	120g	150g	300g	600g	600g	1000g	1500g	2200g	3000g	6000g
<b>Ablesbarkeit</b>	0.001g	0.005g	0.01g	0.02g	0.01g	0.01g	0.05g	0.01g	0.1g	0.1g
<b>Wiederholbarkeit (S.D.)</b>	0.002g	0.005g	0.01g	0.02g	0.01g	0.01g	0.05g	0.03g	0.1g	0.2g
<b>Linearität (+/-)</b>	0.003g	0.01g	0.02g	0.04g	0.02g	0.02g	0.1g	0.06g	0.2g	0.4g
<b>Größe Wägeplatte</b>	120mm ø									145mm ø
<b>Wägeeinheiten</b>	g, lb, oz, N, GN, ct, dr, dwt, mm, ozt, T, tl.H, tl.S, tl.T									
<b>Stabilisierungszeit (sec)</b>	2									
<b>Schnittstelle</b>	RS-232, USB									
<b>Kalibrierung</b>	Extern / interne manuelle Kalibrierung									
<b>Anzeige</b>	Backlit LCD with 18mm-high digits									
<b>Stromversorgung</b>	12VDC 50/60Hz 800mA adapter / Interner Akku									
<b>Betriebstemperatur</b>	0° bis 40°C									
<b>Gehäuse</b>	ABS Kunststoff									
<b>Windschutz</b>	Rund 132mm ø x 90mm									k.A.
<b>Gesamtabmessungen</b>	174x252x80mm (BxTxH)									
<b>Nettogewicht</b>	2kg									

## Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung
308002042	Hartschalentragekoffer mit Schloss
308232034	Arbeitsschutzhaube (5)
308232035	Arbeitsschutzhaube (10)
308232030	Arbeitsschutzhaube
3126011263	Thermopapier
3126011281	Thermopapier (10er-Pack) (für Art.Nr. 1120011156-ATP Drucker)
1120011156	ATP Thermodrucker
700400103	RS-232-Kabel
700100046	Schloss und Kabel Typ Kensington
600002028	Adam DU - Datensammelprogramm
3074010267	USB Kabel
700660290	Adam Kalibrierschein
700100007	F1 100g Kalibriergewicht
700100012	F1 200g Kalibriergewicht
700100009	F1 1kg Kalibriergewicht
700100010	F1 2kg Kalibriergewicht

## Nützliches Zubehör



### ATP Thermodrucker

Seine Bedienerfreundlichkeit und der schnelle, leichte Aufbau machen den Thermodrucker zu einem vielseitigen Gerät. Der Drucker ist über seine einzelne Vorschubtaste und drei leicht zu lesende LED-Anzeigen einfach zu bedienen.



### Schloss und Kabel Typ Kensington

Das Sicherheitsschloss passt in den an den Waagen eingebauten Befestigungsschlitz: Das zugehörige Kabel kann um ein festes Objekt geschlungen werden, um so Ihre Waage an Ort und Stelle zu sichern. Das flexible Stahlseil ist schwer zu zerschneiden, und das Kombinationsschloss bietet



### Adam DU - Datensammelprogramm

Die Adam DU Software verbindet Ihre Waage mit dem Labor-Netzwerk und hilft, eine nahtlose Datenerfassung, Übertragung und Analyse zu erreichen. Die Adam DU verfügt über eine einfach zu bedienende Benutzeroberfläche mit einem Hauptbefehlsfenster, so dass einfach und schnell Daten von bis zu acht Adam Waagen gleichzeitig überwacht und über die RS-232 und USB-Verbindungen gesammelt werden können.

## Bestellen